




WELL-BEING

BETJENINGSVEJLEDNING

ITEM NO: 300135

Happy-Feet

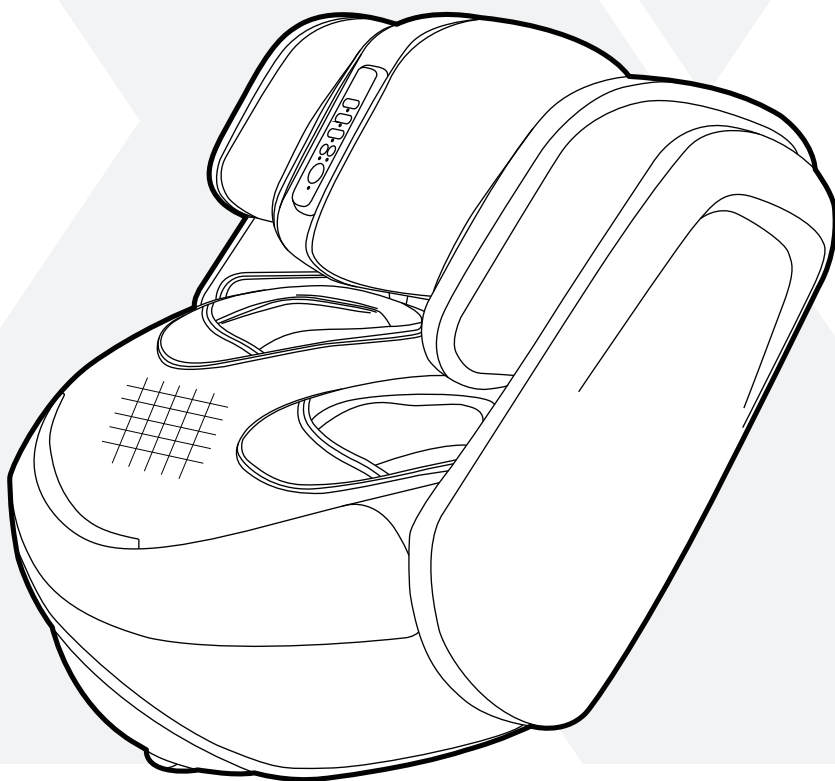

Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



AIR

XSYSTEMS
Happiness at work

INDHOLD

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	3
a) Vigtige sikkerhedsinstruktioner.....	3
b) Forholdsregler for driftsmiljøet.....	3
c) Brugerforholdsregler.....	4
d) Forholdsregler for strømforsyning.....	4
e) Forholdsregler for ledning/stik.....	5
Bemærk.....	5
Garantikrav.....	6
Produktdele.....	7
Produktgenskaber og betjeningsillustrationer.....	7
Strøm.....	9
Varme.....	9
Lufttryk.....	9
FEET.....	9
LEG.....	9
Automatisk.....	9
Knee.....	9
Produktbetjeningsvejledning.....	10
a) Instruktioner inden brug.....	10
b) Hvordan bruger du det.....	10
Produktbetjeningsvejledning.....	11
Produktvedligeholdelse.....	12
a) Opbevaring.....	12
b) Rengøring.....	12
Opmærksomhed.....	12
c) Vedligeholdelse.....	12
Fejlfinding.....	13
1. Det virker ikke.....	13
2. Stopper pludselig med at virke.....	13
Produktspecifikationer.....	14
Happy-Feet.....	14

Tak fordi du har købt Happy-Feet.

Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt, før du bruger massageren. Sikkerhedsforanstaltningerne er opdelt i "advarsler" og "bemærkninger" i forhold til graden af fare. Denne bog bør gemmes tilgængelig til fremtidig reference efter læsning.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

a) Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- For at sikre sikker og korrekt brug, bedes du læse instruktionsmanualen omhyggeligt, inden du bruger dette produkt.
- Brug produktet kun som beskrevet i denne manual.
- Afbryd altid produktet fra el-nettet øjeblikkeligt efter brug og inden rengøring.
- Brug ikke dette produkt, hvis du har sensitiv hud, neuropati eller dårlig cirkulation.
- Lad ikke børn eller personer med mental handicap bruge varmfunktionen uden ordentlig opsyn. Forkert brug kan være farligt.
- Brug ikke dette produkt under et tæppe eller dækket. Overophedning kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.
- Dæk ikke dette produkt for at undgå elektriske fejl eller skader på grund af overdreven høj motortemperatur.
- Stop massagen øjeblikkeligt, hvis du føler ubehag.
- Brug aldrig dette produkt, hvis det er blevet tabt, har en beskadiget ledning eller stik, oplever en funktionsfejl eller er blevet tabt i vand. Kontakt venligst et autoriseret servicescenter for nødvendig kontrol og reparation.
- Brug ikke komponenter, der ikke anbefales af producenten.
- Indsæt ikke genstande i nogen åbninger i produktet.
- Hvis du vil afbryde strømforsyningen, skal du sørge for at slukke for alle betjeningskontroller og fjerne stikket fra stikkontakten.
- Brug ikke dette produkt som medicinsk udstyr. Hvis du har brug for en professionel diagnose eller behandling, skal du konsultere en professionel læge.

b) Forholdsregler for driftsmiljøet

- Brug ikke denne massager i fugtige eller ekstremt støvede omgivelser for at undgå funktionsfejl.
- Brug ikke denne massager ved en temperatur over 40 grader Celsius.
- Brug ikke denne massager udendørs.
- Undgå at placere eller betjene denne massager i direkte sollys eller nær en varmelegeme eller komfur.

c) Brugerforholdsregler

- Sørg for, at dette produkt er langt væk fra varme overflader.
- Konsulter venligst din læge inden brug, hvis du har følgende tilstande:
 - Hjertesygdom
 - Ondartet tumor
 - Rygsmerter
 - Skoliose i rygsøjlen
 - Hypertension
 - Osteoporose
 - Graviditet eller menstruation
 - Fysiske gener, feber, hævelse eller betændelse, blå mærker, allergier osv.
 - Personer, der er blevet advaret af deres læge om ikke at få massage på grund af risikoen for skade eller fysiske gener som blodpropper (trombose), alvorlige aneurismer, akutte venøse tumorer, alle former for hudinflammation, infektiøse hudsygdomme (inklusiv betændelse i underhuden) osv.
 - Advarsler: Brug ikke massageren sammen med følgende medicinske apparater:
 1. Pacemaker eller andet indopereret medicinsk udstyr.
 2. Kunstigt hjerte.
 3. Elektrokardiogram eller lignende medicinsk udstyr.

Ellers kan der opstå funktionsfejl i det medicinske udstyr, hvilket sætter brugerens liv i fare.

d) Forholdsregler for strømforsyning

- Tænd ikke for kontakten, når dine hænder er våde.
- Nedsænk ikke eller spray vand eller væske på kontakten til strømbetjeningen.

e) Forholdsregler for ledning/stik

- Forbind eller fjern ikke stikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød eller fejl i produktet.
- Træk ikke i ledningerne, når du trækker stikket ud. Hold i selve stikket.
- Da standard driftstiden er 15 minutter, vil alle funktioner stoppe efter 15 minutter. Afbryd produktet fra el-nettet med det samme efter brug. Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Placer ikke stikket under produktet eller under tunge genstande.
- Vælg ikke strømstikket omkring produktet, da det kan blive beskadiget og forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke dette produkt, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis stikkontakten er løs.
- Bær ikke dette produkt i forsyningsledningen eller brug ledningen som håndtag. Hvis strømstikket er beskadiget, bedes du ringe til servicecentret eller en autoriseret tekniker for nødvendig kontrol og vedligeholdelse.


Bemærk

- Sov ikke, mens massøren kører.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er beruset eller fysisk ubehagelig.
- Stå ikke på produktet eller læg en tung vægt på det.
- Brug ikke dette produkt i mere end 30 minutter.
- Brug ikke dette produkt, hvis det stof, der dækker det, er slidt.
- Brug ikke dette produkt inden for en time før eller efter et måltid.
- Når du bruger omvendingsfunktionen, når vinklen er nået maksimalt, må du ikke fortsætte med at vippe hårdt, da det kan beskadige produktet.
- Når du bruger produktet ved lav stuetemperatur, skal du undgå pludselig brug af varmfunktionen. Juster stuetemperaturen til normal før opstart af varmfunktionen.
- Når du flytter dette produkt fra et sted med lav temperatur til en varmere indstilling, kan det forårsage funktionsfejl på grund af fugtansamling i komponenterne. Lad produktet stå i normal stuetemperatur i en time før brug.
- Brug ikke dette produkt kontinuerligt, hvis du finder beskadigede komponenter eller produktet i unormal tilstand.
- Hvis der opstår strømafbrydelse under din massage, skal du forsøge at undgå yderligere skade på grund af pludselig strømgenopretning.
- Hold op med at bruge produktet, hvis der er tordenvejr og lyn.

Garantikrav


1. Garantien kan ikke overføres.
2. Garantien er kun gyldig, hvis produktet er købt fra Xsystem.
3. Bevis på køb (original kvittering) kræves for alle garantireparationer.
4. Alle underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til garantier om egnethed og salgbarhed, er begrænset til den varighed, der er angivet i garantipolitikken.
5. Skader forårsaget af misbrug, forkert behandling og uautoriseret ændring og reparation er ikke dækket af denne garanti.
6. Garantien dækker ikke tilbehør og vedhæftede filer, der ikke tilhører massagenheden.
7. Garantien er ikke gyldig for udlejning, forretningsmæssige, kommercielle, institutionelle eller andre ikke-boligbrugere.
8. Alle tjenester dækket af denne garanti skal godkendes af Xsystem og reparerer af autoriserede teknikere.
9. Hvis udskiftningsdele til defekte materialer ikke er tilgængelige, forbeholder Xsystem sig retten til at foretage udskiftninger i stedet for reparation eller udskiftning.



Produktdele

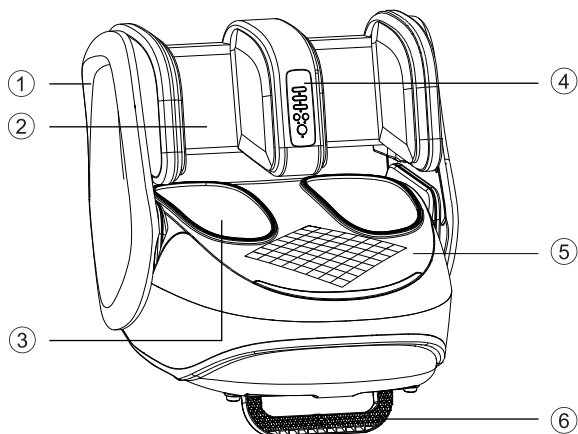


1. Håndtag
2. Benstofpose
3. Fodstofpose
4. Betjeningspanel
5. Øverste skal
6. Stativ

Produktegenskaber og betjeningsillustrationer

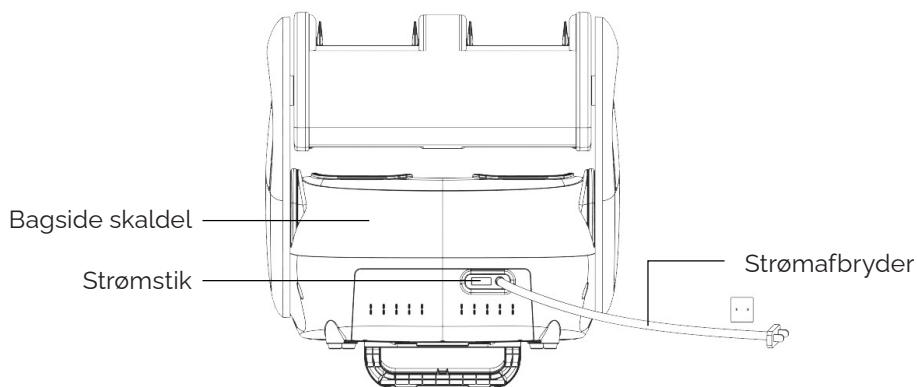


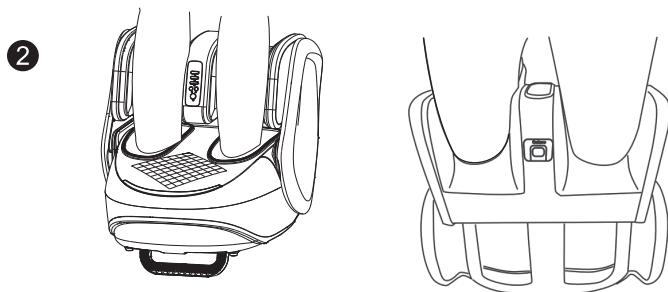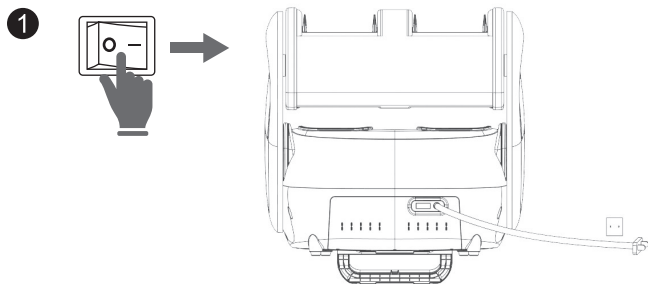

1. Venligst isæt stikket i stikkontakten og tryk på strømafbryderen, så den viser '-'.
2. Drej den som du ønsker, drejestruktur med 0° til 140° flip, massage fra læg, lår eller knæ.

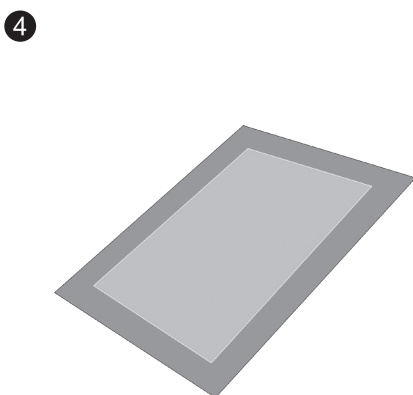

3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at standse.
Venligst drej strømafbryderen til OFF "O" og tag stikket ud af stikkontakten.
4. Forslag: Brug denne maskine på tæppe for at reducere støjniveauet.

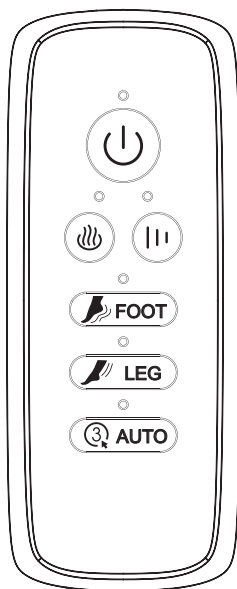

Strøm

I standby-tilstand blinker den blå lampe. Tryk for at starte massage og tryk igen for at slukke.

Varme

For at styre den varme kompressionsfunktion skal du trykke for at vise den blå lampe og trykke igen for at slukke. Efter opstart af maskinen og indtastning i det automatiske program er varmen forudindstillet til åben.

Lufttryk

For at styre tryk styrken i produktet er den opdelt i tre sektioner: den svage sektion er den grønne lampe, den midterste sektion er den blå lampe, og den kraftige sektion er den røde lampe.

FEET

Tænd for fodmassagefunktionen for at starte fodmassage - tryk på lufttrykket for at vælge dit massage niveau.

LEG

Tænd for benmassagefunktionen for at starte benmassagefunktionen - tryk på lufttrykket for at vælge dit massage niveau.

Automatisk

Det er opdelt i tre slags automatisk program: program 1 er grøn, program 2 er blå, program 3 er rød. Automatisk program åbnes forudindstillet som program 2 (blå). Klik igen for program tre, klik igen for program 1, cyklus.



Knee

I standby-tilstand blinker den blå lampe. Tryk for at tænde knæmassagefunktionen (med varme og luftmassage funktion) og tryk derefter på knappen for at slukke for funktionen. Efter aktivering af denne funktion stopper rullerne på benmassageafsnittet.

Produktbetjeningsvejledning

a) Instruktioner inden brug


Venligst opbevar dette produkt et tørt sted og udsæt ikke produktet for direkte sollys. Læg tæppet under produktet for at minimere støjniveauet under brug.

b) Hvordan bruger du det

Dette produkt bruger kun strømforsyning AC220v-240v, 50/60Hz
Sørg for, at din indendørs spænding passer til denne specifikation parameter.

- Tilslut AC-strømkablet til stikkontakten
- Tænd strømafbryderen på bagsiden af produktet til "I", når den røde lampe lyser. Den gule lampe på kontrolpanelet blinker, når produktet er i standby-tilstand.

Før du indsætter stikket i stikkontakten.
Sørg for, at hovedafbryderen er på 'o' .

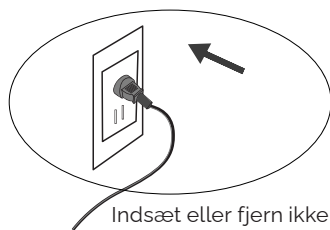

Indsæt eller fjern ikke
stikket med våde hænder

Produktbetjeningsvejledning

- Sæt dine ben i produktet, tryk på POWER-knappen, og den blå lampe lyser.
- Alle funktioner er tilgængelige at vælge imellem.
- Hvert massageprogram varer 15 minutter. Produktet stopper, når massagen er færdig.
- Tryk på hovedafbryderen til 'o' for at slukke for strømmen.
- Transportationshjul

Der er transportationshjul installeret i bunden af produktet. Dette er til flytning og opbevaring. Hold venligst godt fast i begge sider af produktet, før du flytter produktet rundt.


Produktvedligeholdelse

a) Opbevaring

- Venligst opbevar produktet i emballagekartonen og placer det et sikkert, tørt, godt ventileret og skyggefuldt sted.
- Bøj ikke strømstikket.
- Hæng ikke strømkablet og træk ikke i produktet.
- Undgå, at skarpe genstande ødelægger overfladen af produktet.
- Venligst opbevar ikke maskinen i direkte sollys eller på steder med høj temperatur.

b) Rengøring

- Før rengøring, sørg for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten, og at maskinen er fuldstændig afkølet.
- Brug en fugtig klud til at rengøre produktet.
- Sørg for, at produktet er fuldstændig tørt før genbrug.
- Den aftagelige stofklud kan vaskes på almindelig vis.

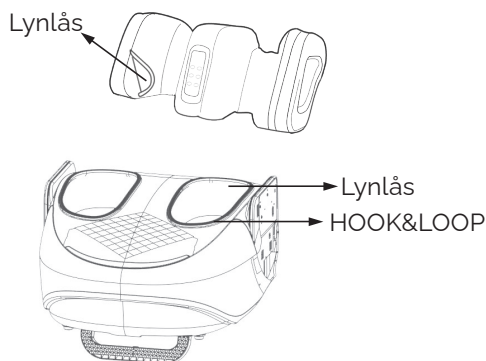

Opmærksomhed

- Sørg for ikke at bruge benzol, thinner eller andre ætsende rengøringsmidler til at rengøre produktet.

c) Vedligeholdelse

- Hold produktet rent og opbevar det i en tør miljø.
- Når produktet ikke er i brug i lang tid, skal du venligst placere et støvbeskyttelsesdæksel på produktet.

Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, henvises der til følgende løsninger. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, bedes du sende produktet til vores servicecenter eller en autoriseret tekniker til nødvendige kontroller og reparation.

1. Det virker ikke

- Kontroller at stikket er korrekt tilsluttet stikkontakten.
- Tænd for strømafbryderen på bagsiden af produktet.
- Tænd for tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet.
- Hvis sikringen er gået, indsæt en tandstik i det lille hul ved "sikring" under strømafbryderen, før du tager sikringen ud.

2. Stopper pludselig med at virke

- Kontroller, om strømafbryderen er slukket.
- Hvis massagetiden er overskredet (15 minutter), vil produktet automatisk stoppe.
- Hvis produktet har været i brug i lang tid, kan motoren være beskyttet mod overophedning. Lad produktet køle af og genstart derefter strømmen.
- Hvis du lægger for meget pres på rullerne, kan de stoppe med at fungere korrekt. Sluk for strømmen, og tænd den igen.

Hvis ingen af disse løsninger løser problemet, anbefales det at kontakte vores servicecenter eller en autoriseret tekniker for yderligere assistance.

Produktspecifikationer

Happy-Feet

Spænding: AC 220V-240V, 50/60Hz

Strømforbrug: 60W

Timer: 15 minutter



Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk

