




WELL-BEING

**BETJENINGSVEJLEDNING**

ITEM NO: 300150

# Massage Chair Deluxe

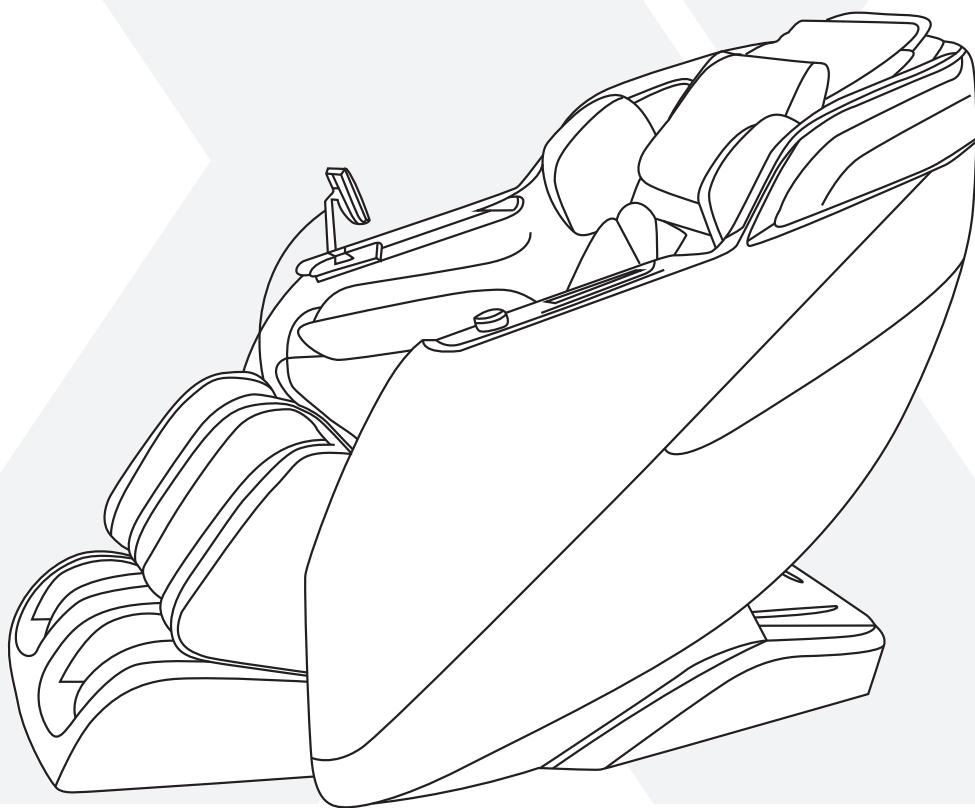

**Happiness at work**



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



AIR

**X SYSTEMS**  
Happiness at work

# Indhold

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>Sikkerhedsforanstaltninger</b> ..... | 3-8   |
| <b>Funktionsindikation</b> .....        | 9-11  |
| Funktionsindikation .....               | 9     |
| Instrumentbræt .....                    | 10    |
| Betjeningsinstruktioner .....           | 11    |
| <b>Brugervejledning</b> .....           | 12-16 |
| Betjeningsinstruktioner .....           | 12-13 |
| Tastaturinstruktioner .....             | 14    |
| Placering .....                         | 15    |
| Sådan fungerer det .....                | 16    |
| <b>Installer massagestol</b> .....      | 17-19 |
| Installation .....                      | 17    |
| Fejlfinding .....                       | 18    |
| Specifikationer .....                   | 19    |

# Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs venligst disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt, før du bruger produktet.
- Foranstaltningerne her giver tips til, hvordan du sikkert og korrekt bruger produktet for at forebygge mulig skade eller personskaade på produktet, brugeren og andre.
- Denne forholdsregel skelner mellem to opfordringer: [Advarsel] og [Forsigtighed] baseret på omfanget og alvoren af den risiko eller skade, der kan opstå ved forkert betjening. Sikkerhedsrelateret indhold er meget vigtigt, så sørg for at overholde det.

|                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Fejlbetjening kan forårsage alvorlig skade på brugeren.                                                                                                      |
|  Advarsel | Ukorrekt betjening kan resultere i skade på brugeren og skade på ejendom. Fysisk skade henviser til skader relateret til huse, ejendom, husdyr, kæledyr osv. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dette symbol angiver en advarsel eller forholdsregel.<br>(Billedet til venstre bruges generelt med en advarsel eller forholdsregel)                                         |
|  | Dette skilt informerer dig om forbudt indhold, og billedet er en beskrivelse af det specifikke forbudte indhold.<br>(Billedet til venstre viser, at demontering er forbudt) |
|  | Dette tegn informerer dig om obligatorisk eller nødvendigt indhold.                                                                                                         |

- Efter læsning, sørg venligst for at gemme det et sted, hvor brugere kan se det til enhver tid.

## Advarsel

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis der opstår røg og unormal lyd (unormal tilstand), skal du straks afbryde strømmen. Efter at have bekræftet sikkerheden, kontakt da forhandleren for reparation. Det er strengt forbudt at reparere selv for at undgå fare.</li><li>• Vand trænger ind i værtten.</li><li>• Affald er faldet ind i værtten.</li><li>• Kraftigt fald, fald eller skade på kabinnet.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Forsigtighedsregler

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Overhold | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvis du under brug oplever nogen form for unormalitet i din krop, bør du straks stoppe med at bruge produktet og konsultere en læge.</li><li>2. Dette produkt bør placeres på en flad overflade til brug for at undgå skadeulykker.</li><li>3. Før du bruger dette produkt, skal du bekræfte, om tænd/sluk-knappen fungerer korrekt for at undgå skadeulykker.</li></ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Advarsel

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Forbudt             | <p><b>Følgende personer må ikke bruge massagestolen:</b><br/>Personer med trombose (blodsygdom, alvorligt aneurisme, akut venøst aneurisme), forskellige hudsygdomme eller hudinfektioner (herunder sygdomme i subkutant væv), osv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Forsigtighedsregler | <p><b>Følgende personer bør konsultere en læge, før de bruger en massagestol:</b><br/>Patienter der er følsomme over for elektromagnetisk påvirkning og som har implantater eller andre medicinske apparater i kroppen.<br/>Patienter med maligne hævelser og smerte. Patienter med hjertesygdomme. Kvinder der er gravide eller har menstruation.<br/>Personer med diabetes og perifere cirkulationsforstyrrelser. Personer med nedsat følesans.</p> <p><b>Skal overholdes</b><br/>Personer med skader i masseringsområdet.<br/>Personer med feber over 38C, såsom akut inflammation (tyfus, højt blodtryk). Meget syge eller fysisk svagelige personer.<br/>Patienter med knoglebrud og akut knoglesmerte.<br/>Personer med muskelstrækninger og myopati.<br/>Overfladen på apparatet kan være varmt, og de, som ikke er følsomme over for varme, skal være særligt opmærksomme ved brug.<br/>Desuden, brug venligst med forsigtighed hvis du føler dig usund, utilpas eller har behov for ro.</p> <p>Programmerne til massage i dette produkt varer 15 minutter pr. cyklus. Undgå venligst at massere samme område kontinuerligt. Hvis det er nødvendigt at fortsætte med at bruge det, vent venligst mere end 30 minutter for at undgå oversimulering af musklerne eller nervesystemet.</p> |

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Forsigtighedsregler

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ingen våde hænder | Anvend ikke apparatet, når din krop er våd for at undgå stød eller funktionsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Ingen vand        | Dette produkt kan ikke blive nedsænket i vand eller andre væsker og heller ikke anvendes eller opbevares i fugtige omgivelser som badeværelser for at undgå elektrisk chok eller maskinskade.                                                                                                                                                           |
| <br>Overhold          | Sørg for, at der ikke er mennesker eller kæledyr i nærheden, før proceduren fortsættes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br>Ingen demontering | Det er strengt forbudt selv at demontere eller reparere dette produkt, ledning, håndkontrol og andre komponenter, for at undgå stød, branulykker eller funktionsfejl. Når strømkablet er beskadiget, er det forbudt at demontere eller erstatte det uden tilladelse. Det skal repareres eller udskiftes af fabrikanten eller en kvalificeret fagperson. |
| <br>Forbudt           | Brug ikke beskadigede strømkabler.<br>Stræk, træk ikke i, vrid ikke, indpak ikke eller beskadig strømkablet, og hæng ikke tunge genstande på ledningen. Brug af en beskadiget strømledning kan resultere i stød, kortslutning eller brandulykker.                                                                                                       |

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Advarsel



Forbudt

Massagestolen vil automatisk ændre vinkel under det automatiske program. Det er forbudt at komme tæt på nogen revner og huller for at undgå skader.

Brug ikke strømkilder, der ikke er AC 220V. Strømledningen må ikke vikles rundt om produktet for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller brandulykker.

Lad ikke børn lege på dette produkt for at undgå skader eller maskinsvigt.

Når du justerer stolens ryglæn, sæde og benløft, skal du sikre dig, at der ikke er andre personer, kæledyr eller genstande bagved eller under benmassagen. Under justeringsprocessen, skal du ikke placere nogen kropsdel, inklusiv hænder og fødder, i mellemrummene mellem ryglænet og sædet, ryglænet og armlænene, armlænene og skulderstropperne, samt sædet og overtrækene under armlænene for at forebygge skader.

Brug ikke dette produkt uden tøj for at undgå hudskader.

Sørg for at bruge dette produkt som beskrevet i denne manual og sid ikke direkte på dine ben eller dele af armlænene for at undgå skader eller ulykker.

Brug ikke kroppens overtræk, hvis det er demonteret eller beskadiget for at undgå skader eller ulykker.

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Forsigtighedsregler

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Overhold          | Hvis der er strømafbrydelse, når det ikke er i brug, eller mens det er i brug, skal du straks slukke for strømafbryderen og trække stikket ud for at undgå problemer, når strømmen tændes igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Ingen våde hænder | I tilfælde af strømafbrydelse, når det ikke er i brug eller mens det er i brug, skal du straks slukke for strømafbryderen og trække stikket ud for at undgå lækage, elektrisk stød eller brandulykker, når strømmen tændes igen. Sluk for hovedstrømafbryderen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.                                                                                                                                                                                           |
| <br>8-3               | Når du rengør, skal du være sikker på at slukke for strømafbryderen og trække stikket ud af stikkontakten for at undgå brand eller elektriske stødulykker. Når du trækker strømledningen ud, skal du ikke trække strømledningen med magt. Hold i stedet fat i strømledningen og træk den ud for at undgå lækage.                                                                                                                                                                                   |
| <br>Forbudt           | Brug ikke dette produkt umiddelbart efter måltider eller alkohol for at undgå fysiske ubehag. Hæng ikke tunge genstande på strømledningen eller håndkontrollinjen, og håndkontrollen må ikke blive ramt eller tabt af eksterne kræfter for at undgå fejl, funktionsfejl, elektrisk stød eller brandulykker. Brug ikke dette produkt nær ildkilder eller varmeapparater, og brug det ikke på gulve med gulvvarme eller andre varmekilder. Ryg venligst ikke, når du bruger det, for at undgå brand. |

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Advarsel



Forbudt

Når du bruger dette produkt, er det vigtigt at følge disse sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge potentielle skader og ulykker.

**Undgå Hårde Træk og Ridser:** Træk ikke hårdt i stoffet eller ridse det med knive eller andre skarpe genstande for at forhindre skader eller skade.

**Stikkabel Pleje:** Bøj eller træk ikke kraftigt i strømledningen eller manuelt styringskabel for at undgå maskinsvigt eller risikoen for brand.

**Forsigtighed med Håndkontrol:** Beskyt håndkontrollen mod stød eller tab for at forhindre fejl eller maskinsvigt.

**Beskadigede Dele:** Brug ikke produktet, hvis strømledningen, stikket eller kontakten er beskadiget for at undgå elektrisk stød, kortslutning eller brand.

**Klemningsfare:** Hold dine fingre væk fra bevægelige dele, især når du løfter eller sænker dine ben, for at forhindre skade.

**Sikkerhed for Bevægelige Dele:** Påfør ikke ekstern kraft på produktets bevægelige dele for at undgå personskader eller maskinsvigt.

**Brug Under Søvn:** Brug ikke produktet, mens du sover, da det kan føre til skader eller ubehag.

**Gulvbeskyttelse:** Træk ikke produktet hen over trægulve, tæpper eller overflader, der er modtagelige for ridser. Placer det forsigtigt efter flytning for at undgå skader på gulvet.



## Advarsel



Forbudt

**Driftsmiljø:** Brug kun produktet i almindelige husstandsomgivelser og ikke i kommercielle eller udendørs indstillinger.

**Overophedningsrisiko:** Undgå at dække produktet med tæpper eller lignende materialer for at forhindre overophedning og brandfare.

**Strømtilslutning:** Sørg for at strømledningen og stikkontakten passer sikkert sammen og er fri for skidt. Undgå at bruge multistikadaptere for at reducere risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brandfare.

**Vægtbegrænsninger:** Stå ikke, trød ikke på eller placer tunge genstande på produktet for at undgå personskader eller skader.

**Nærhed til Varme:** Hold produktet væk fra varmekilder eller brandfarlige genstande for at forhindre deformation, maskinsvigt eller brand.

**Kemisk Eksponering:** Undgå at bruge produktet i miljøer med volatile kemiske koncentrationer såsom olie eller gas, hvilket kan føre til produktforringelse eller brandfare.

**Rengøringsmidler:** Brug ikke organiske opløsningsmidler, alkohol eller insektmidler til at rengøre produktet for at undgå risikoen for revner, elektrisk stød eller brand.

**Overvåget Brug:** Sørg for at børn og personer med intellektuelle handicap holdes væk fra produktet under brug for at forebygge uheld.

**Brug af Lammede Personer:** Personer, der er lammet, bør ikke bruge dette produkt for at undgå risikoen for fysisk ubehag eller skade.


At holde sig til disse forholdsregler vil hjælpe med at sikre din sikkerhed og forlænge produktets levetid.




# Funktionsindikation

## Indikation

Denne stol vil automatisk detektere kropsform, venligst lig ned afslappet når den tændes!

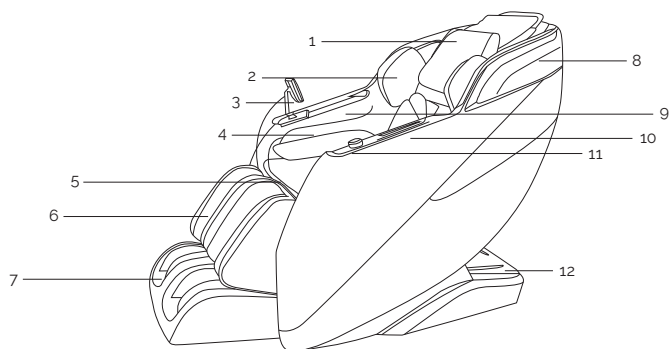


- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. Pude       | 7. Fødder            |
| 2. luftpuder  | 8. Lys               |
| 3. controller | 9. Trådløs opladning |
| 4. armlæn     | 10. USB-port         |
| 5. Sæde       | 11. Tastatur         |
| 6. Ben        | 12. Base             |

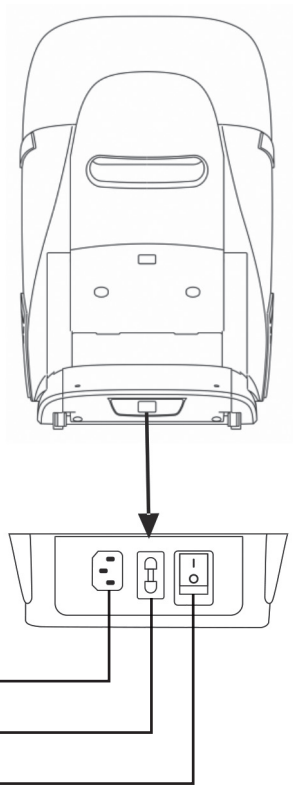


# Funktionsindikation

## Kontrolpanel

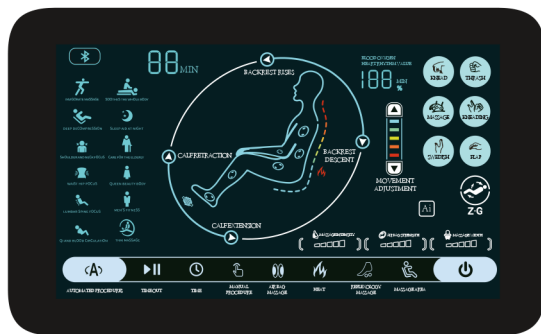

## Installation af kontrolpanel

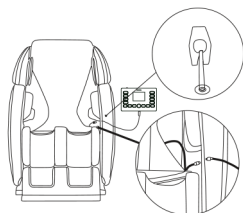

Placer holderen til skærmen på skruen på venstre armlæn og stram bunden af holderen til skærmen med skruen;

Find forbindelsen til skærmens sædehynde på venstre side, tilslut forbindelsen for skærmen og sædehyndens forbindelse, og stram dem;

1. Spild ikke vand eller andre væsker på massagestolen eller skærmen.
2. Betjen ikke med våde hænder.
3. Sid ikke på, tab ikke eller træng ikke på skærmen, og træk ikke tvangsvis i ledningen til skærmen.
4. Tryk ikke på væskekrystalvisningen og touch-panelet med skarpe eller hårde genstande. (Ellers kan det forårsage skader)
5. Du kan justere stramheden af skruerne og styre holderens fleksibilitet.

# Funktionsindikation

| Navn                                                                                                      | Funktioner                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          | Power on/off<br>Massagestolens standard driftstid er 20 minutter |
| <br>AUTOMATED PROCEDURES | Skifter mellem automatiske programmer fra A1 til A6              |
|                          | Massagemekanismen bevæger sig op                                 |
|                          | Massagemekanismen bevæger sig ned                                |
| <br>TIME OUT             | Massagemekanismen stopper                                        |
| <br>CALF RETRACTION      | Justering af fodstøtten op                                       |
| <br>CALF EXTENSION       | Justering af fodstøtten ned                                      |
| <br>BACKREST RISES       | Ryglæn justeres op                                               |
| <br>BACKREST DESCENT     | Ryglæn justeres ned                                              |
| <br>REFLEXOLOGY MASSAGE  | Solemassage tænd/sluk                                            |
| <br>Z.G                 | Zero Gravity                                                     |
|                        | Bluetooth                                                        |
| <br>MANUAL PROCEDURE   | Skifter til manuelle programmer                                  |
| <br>TIME               | Indstilling af tid                                               |
| <br>AIRBAG MASSAGE     | Skifter kompression af luftpuder i forskellige dele              |
| <br>HEAT               | Opvarmning                                                       |
| <br>MASSAGEOMRÅDE      | Skifter til forskellige massageområder i manuelle tilstande      |

# Funktionsindikation


| Navn                                                                                                   | Funktioner                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>MASSAGEINTENSITET | Justering af massageintensitet på 3 niveauer                      |
| <br>AIRBAGSTRENGTH    | Justering af luftpudetrykintensitet på 3 niveauer                 |
| BLOOD OXYGEN<br>HEART RHYTHM VALUE                                                                     | Hjerterytme og Blodiltmætning                                     |
|                       | Breddejustering på massageapparat                                 |
|                       | Tænd/sluk for skærm belysning. Denne knap er på toppen af skærmen |
|                       | Tænd/sluk for AI-stemme                                           |
|                       | Tænd/sluk for æltning                                             |
|                       | Tænd/sluk for Tuina                                               |
|                       | Svensk massage                                                    |
|                       | Bankemassage                                                      |
|                      | Æltning og bankemassage                                           |
|                     | Klapmassage                                                       |
|                     | Beroligende tilstand                                              |
|                     | Dyb massage-tilstand                                              |
|                     | Hurtig massage-tilstand                                           |
|                     | Sovetilstand                                                      |
|                     | Skulder- og nakketilstand                                         |

# Funktionsindikation

| Navn                                                                                                                | Funktioner                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                    | Ældre velværetilstand     |
|                                    | Talje- og ballertilstand  |
| <br>DAME SKØNHEDSKROP              | Dame-tilstand             |
| <br>FOKUS PÅ<br>LÆNDEHVRIVELSØJLEN | Rygpleje-tilstand         |
| <br>MÆNDS FITNESS                  | Herre-fitness-tilstand    |
| <br>QI OG BLODCIRKULATION          | Blodcirkulations-tilstand |
| <br>THAI MASSAGE                   | Thai stræk-tilstand       |

# Funktionsindikation

## Tastaturinstruktioner

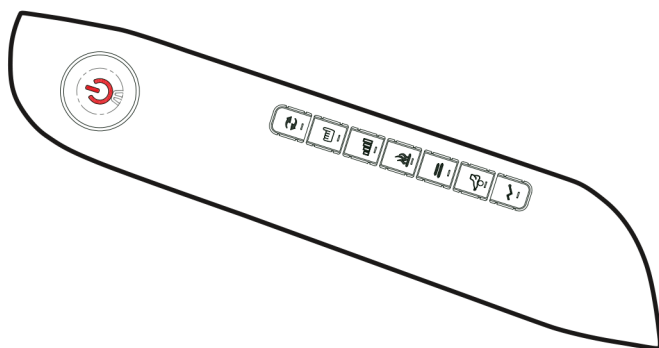


| Navn                                                                                | Funktioner                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 18 Automatiske programmer omskifter                                                                |
|    | Manuel Programme omskifter                                                                         |
|    | 3 niveaurs justering af massageintensitet                                                          |
|    | Opvarmning                                                                                         |
|  | 3 niveaurs justering af luftpudetryk                                                               |
|  | Tænd/Sluk for Sål massage                                                                          |
|  | Zero Gravity                                                                                       |
|  | Tryk på knappen for at tænde/slukke.<br>Drej på knappen for at styre vinklen på liggende position. |

# Installation af massagestol

## Placering

Sørg venligst for, at der er 35 cm foran massagestolen og cirka 8 cm bagved for at undgå, at stolen rammer væggen eller andre genstande, når den vipper.

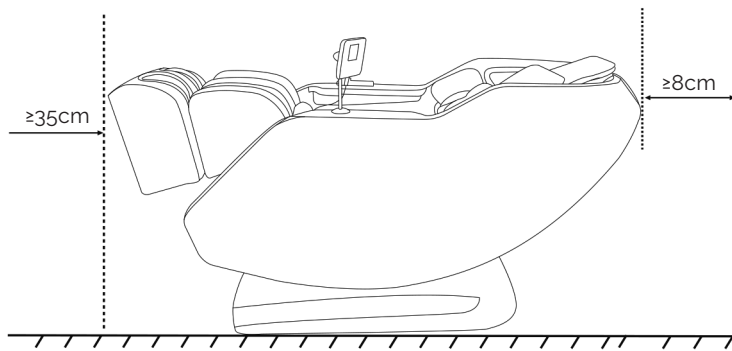

Venligst sørg for at efterlade tilstrækkelig plads omkring massagestolen, når du forbereder dig til massage.



### Advarsler

- Brug ikke i fugtige områder såsom badeværelser eller saunaer.
- Placer venligst maskinen på et fladt og skridsikkert underlag før brug.
- Brug den ikke på steder med meget skidt eller støv, eller på steder med høje omgivelsestemperaturer (over 40°C).
- Placer ikke enheden i direkte sollys eller brug den i nærheden af varmeapparater eller andre steder med høj temperatur.
- Lad ikke åben ild, såsom cigaretter, komme i nærheden af massagestolen.


# Installation af massagestol

## Sådan flytter du på stolen

Venligst sluk for kontakten og afbryd strømmen før flytning.

Tryk stolen bagud først, så de bageste hjul berører gulvet, hvorefter den kan flyttes.

For at undgå at beskadige gulvet, læg venligst en måtte eller andet materiale på gulvet før massagestolen flyttes.

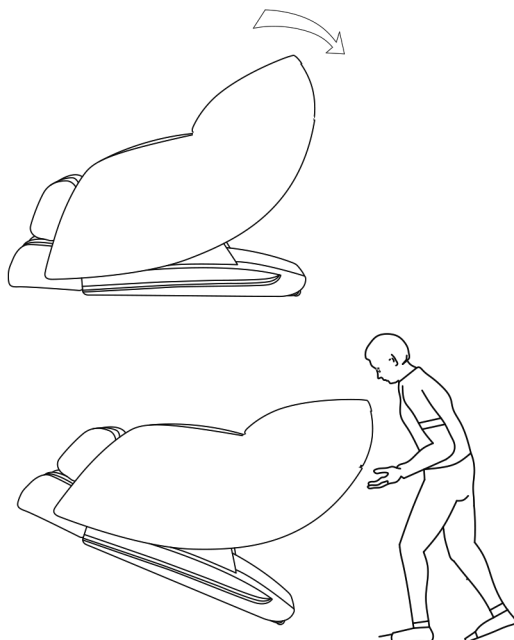

### Vær opmærksom på

1. Hvis gangen er smallere end 90 cm, kan massagestolen ikke transporteres normalt.
2. Hvis du ikke kan transportere massagestolen normalt, kontakt da venligst forhandleren hvor du købte den.
3. Da massagestolen er tung, vær forsigtig for ikke at tabe den under flytning.
4. Flyt ikke massagestolen mens der er mennesker i den.
5. Afbryd stikket fra stikkontakten før massagestolen flyttes. (Ellers kan stikket blive beskadiget, hvilket kan føre til brand eller elektrisk stød.)




# Installation af massagestol


## Installation

### Udpakning af massagestol

Løft den ydre kasse opad, fjern fastgørelsespælene, og tag manualen, strømkablet og andet tilbehør ud.

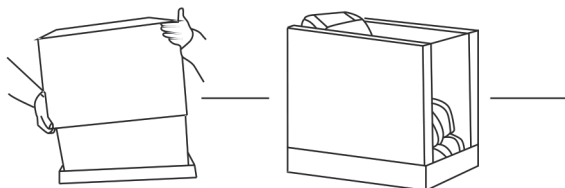

Efter udpakning af kassen skal du lede efter hovedkontakten i bunden af bagsiden af massagestolen, tilslutte strømledningen, tænde for kontakten, og så er massagen klar.

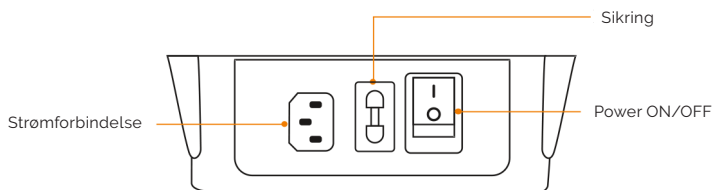

Efter tilbehøret er installeret, skal du indsætte strømstikket i 220V stikket, tænde for strømafbryderen og aktivere håndbetjeningen for at bruge.

## Vedligeholdelse

Følg venligst trinnene for at rengøre læder- og plastdele

1. Sluk for strømmen og tag stikket ud.
2. Opblød en blød, tør klud i vand eller varmt vand indeholdende 3% til 5% neutralt rengøringsmiddel og vrid den grundigt ud.
3. Tør snavs af på læder- og materialeoverflader.
4. Tør igen med en tør klud.
5. Lad det tørre naturligt.

## Forsigtighed

- Brug ikke alkohol, tyndere, benzin og andre kemikalier til rengøring.
- Brug ikke en hårtørret til at tørre overfladen.
- Opvarm ikke produktets stoffer.
- Når du udfører vedligeholdelse, skal du sørge for at trække stikket ud, og ikke trække i det eller sætte det i med våde hænder.



# Fejlfinding

Hvis der stadigvæk er abnormaliteter efter at have udført de følgende inspektioner, for at forhindre ulykker, stop straks brugen, træk strømstikket ud af kontakten, og kontakt forhandleren, hvor du har købt den, eller det nærmeste kundeservicecenter.

| Tilstand                                                                                                             | Årsager og løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyd under drift:                                                                                                     | <p>Lyden af friktionen mellem massagehjulet</p> <p>Stoffet under ælteprocessen og lyden af massagehjulet, der løfter og sænker sig</p> <p>Lyden af æltehandling. Lyden af gnidning fra lufttrykket</p> <p>Lydpumpelyd</p> <p>Lyden af luftposeudstødningen og lyden af sæderyglænets hældning og sænkning</p> |
| Masseringshjulet standser midtvejs, selv under massage:                                                              | <p>Hvis der anvendes for meget kraft på massagehjulet, vil massagehjulet stoppe med at køre. Løft venligst kroppen en smule eller hæv stolens ryglæn en smule, når du bruger den. (Specielt for personer, der vejer mere end 10 kg, venligst vær opmærksom, når du bruger den)</p>                            |
| Selv efter at have trykket på knappen på fjernbetjeningen fungerer den stadigvæk ikke normalt eller kan ikke tændes: | <p>Udfør venligst følgende tjek.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Er strømstikket fuldt indsat i stikket?</li><li>2. Er hovedstrømafbryderen på maskinens midterste og bageste del tændt?</li></ol>                                                                                               |
| Strømledningen og strømstikket er unormalt varme:                                                                    | <p>Stop brug af massagestolen</p> <p>Venligst diskuter med din forhandler eller kundeservicecenter.</p> <p>Lad ikke ikke-servicepersonale adskille eller reparere det.</p>                                                                                                                                    |

# Specifikation

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Produktnavn:           | Massage Chair Deluxe                |
| Spænding:              | 220V~                               |
| Frekvens:              | 50Hz                                |
| Effekt:                | 120W                                |
| Timing:                | 20 min, valgfrit 10-15-20-25-30 min |
| Standard:              | GB4706.1-2005 GB4706.10-2008        |
| Beskyttelsesklasse:    | I                                   |
| Størrelse når oprejst: | 1520×745×1120mm (L×B×H)             |
| Størrelse når udlagt:  | 1820×745×820mm (L×B×H)              |



Tlf. +45 86 85 43 43  
salg@xsystems.dk  
**xsystems.dk**

